

# NeoPlex™ FluCOVID Kit

체외 제허 21-543호

## SARS-CoV-2 및 Influenza Virus 동시다중검사

- SARS-CoV-2 (RdRp gene)
- SARS-CoV-2 (N gene)
- Influenza A Virus
- Influenza B Virus

Single-Tube Multiplex Real-Time RT-PCR 신종 코로나바이러스 및 계절성 독감 원인 바이러스 일괄 검사 임상 증상과 역학적 특성이 유사한 바이러스의 신속 정확한 감별

# **Key Features**

● Single-Tube Multiplex Real-Time RT-PCR Assay 단일 튜브 다중 실시간 역전사 PCR 검사

#### 우수한 포괄성

SARS-CoV-2의 주요 변이 바이러스 진단 가능 Influenza A Virus의 다양한 아형 (H3N2, H1N1pdm09) 포괄 Influenza B Virus의 주요 lineage (Victoria, Yamagata) 포괄

#### 높은 분석학적 & 임상적 성능

Clinical Sensitivity: 98,77% - 100% Clinical Specificity: 99,50% - 100%

Reproducibility: 100%

#### 사용자 편의성 향상

Whole Process Control를 통한 검체부터 결과 분석까지의 전 과정 모니터링 cDNA합성이 필요하지 않은 One-Step RT-PCR을 통한 시험 간소화 PCR Master mix 제조 시, 시약 별 동일한 양 (5 μL)으로 사용자 Hands-on time 절약 NeoPlex™ Viewer 분석 소프트웨어를 통한 쉽고 빠른 결과 분석

#### 빠른 분석 시간

핵산 추출부터 결과분석까지 2시간 30분이내 분석 완료를 통한 당일 결과 보고 가능



# 분석 단계

#### Multiplex Real-time RT-PCR

Step 1 (30 min)

**Nucleic Acid Extraction** 



Manual or Automatic Extraction

#### Step 2 (2 hr)


One-Step RT-PCR



CFX96™ Dx System

#### Step 3 (5 min)

**Data Analysis** 

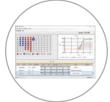

NeoPlex<sup>™</sup> Viewer

- SARS-CoV-2, Influenza Virus 동시다중 검사
- 빠른 분석 시간: 2시간 30분이내 결과 분석 완료

# 적용 장비

CFX96™ Dx System (Bio-Rad) Automation 핵산 추출 장비 호환 가능

### 사용 검체

비인두 도말 (Nasopharyngeal swab)

## 관련 제품

NeoPlex<sup>™</sup> COVID-19 : SARS-CoV-2 (RdRp gene, N gene)

NeoPlex<sup>™</sup> RV-Panel A: Flu A, Flu A-H1N1pdm09, Flu A-H3N2, Flu B, RSV A, RSV B, PIV1, 2, 3, AdV

NeoPlex<sup>™</sup> RV-Panel B : CoV-OC43, NL63, 229E, HKU1, hBoV, hRV, hEV, PIV4, hMPV NeoPlex<sup>™</sup> RB-8 : SP, MP, CP, LP, HI, BP, BPP, MC

RV: respiratory viral pathogens, RB: respiratory bacterial pathogens

# 주문 정보

Cat No.	Product	Description	Method	Size
NR08A	NeoPlex™ FluCOVID Kit	Simultaneous Detection of SARS-CoV-2, Influenza A and B Viruses in a Single Test	Multiplex Real-time RT-PCR	96 Tests/Kit
NR06A	NeoPlex™ COVID-19 Detection Kit	Simultaneous Detection of RdRP and N genes for SARS-CoV-2 in a Single Test	Multiplex Real-time RT-PCR	96 Tests/Kit
NR03A	NeoPlex <sup>™</sup> RV-Panel A Detection Kit	Simultaneous Detection of 10 Viral Respiratory Pathogens in a Single Test	Multiplex Real-time RT-PCR	96 Tests/Kit
NR04A	NeoPlex™ RV-Panel B Detection Kit	Simultaneous Detection of 9 Viral Respiratory Pathogens in a Single Test	Multiplex Real-time RT-PCR	96 Tests/Kit
NR02A	NeoPlex <sup>™</sup> RB-8 Detection Kit	Detection of 8 Respiratory Bacteria causing Pneumonia, Pertussis and Others in a Single Test	Multiplex Real-time PCR	96 Tests/Kit

판매원: ㈜ 진매트릭스

본사 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B동 8층 전화 : 031-628-2045 / 팩스 : 031-628-2002

Email: support@genematrix.net 홈페이지: www.genematrix.net

